



# REVYLINE

# RL 450 NEW

## Портативный ирригатор для полости рта

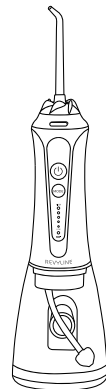


### ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

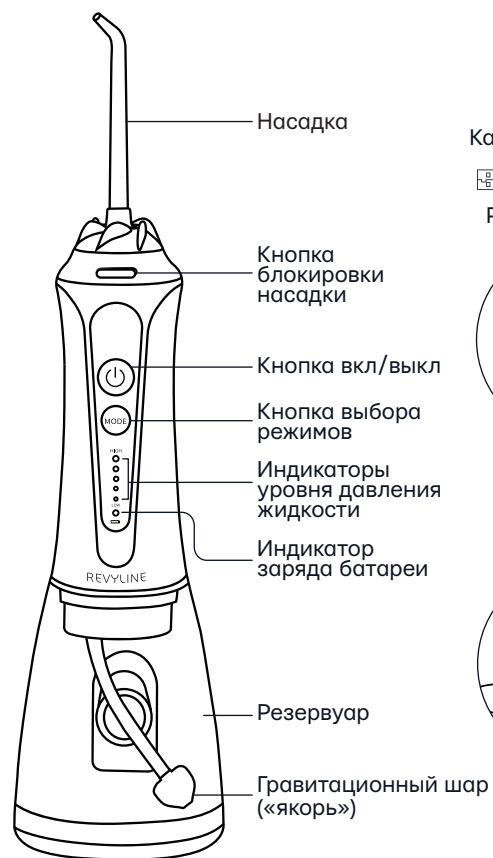


Кабель USB Type-C



Разъем зарядки

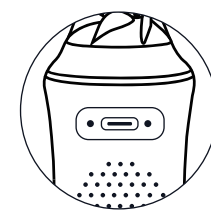

Отверстие для залива воды

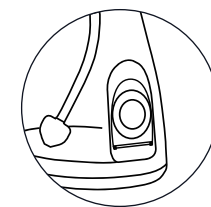

### Поздравляем!

Уважаемый клиент, вы стали обладателем высокотехнологичного устройства, которое позволит вашим зубам и деснам быть здоровыми и красивыми. Ощутите новый уровень чистоты уже после первого применения.

### Меры предосторожности

Перед первым применением ирригатора RL 450 внимательно прочитайте инструкцию по эксплуатации и сохраните ее.






Для предотвращения электротравм, ожогов, пожаров, нанесения вреда себе и окружающим:

1. Остерегайтесь попадания воды в разъем для зарядки, намочания кабеля.
2. Не храните прибор в местах, откуда он может упасть в емкость с водой или раковину.
3. Не направляйте поток воды под язык, в уши, нос или другие чувствительные участки. Прибор генерирует мощную водную струю, которая может нарушить целостность кожи и слизистых оболочек.
4. Используйте только фирменные насадки и аксессуары.
5. Не вставляйте посторонние предметы в гнездо для сменной насадки.
6. Заряжайте прибор вдали от горячих поверхностей.
7. Не включайте ирригатор в помещении, где ранее использовались кислород или аэрозоли.
8. Не заливайте в резервуар ополаскиватели, содержащие йод, масло, отбеливающие ингредиенты. Они снижают эффективность и срок службы прибора.
9. Заливайте в резервуар воду или раствор, рекомендованный лечащим врачом-стоматологом.
10. Перед использованием ирригатора удалите из полости рта все съемные конструкции.
11. Не используйте прибор при наличии ранок в полости рта или на языке.
12. Использование ирригатора детьми возможно с 6 лет только под присмотром взрослых.

### Предупреждения медицинского характера

- Небольшая кровоточивость и дискомфорт десен в начале использования данного устройства являются нормой. Если кровотечение и дискомфорт сохраняются более одной недели, следует обратиться к стоматологу.
- Если в последние 2 месяца вы перенесли операцию в ротовой полости, установили имплантаты или протезы, то перед началом использования данного устройства следует проконсультироваться с врачом.
- Если у вас установлен кардиостимулятор или другие подобные имплантированные устройства, перед использованием прибора обратитесь к своему врачу.

### Зарядка аккумулятора

-  Для зарядки аккумулятора используйте кабель USB Type-C, входящий в комплект.
-  Перед первым использованием прибора аккумуляторную батарею необходимо зарядить полностью.
-  В процессе зарядки индикатор заряда батареи мигает красным цветом.
-  Когда аккумулятор зарядится полностью, индикатор заряда батареи загорится зеленым цветом.
-  Время полной зарядки аккумулятора составляет 4–5 часов в зависимости от источника питания.

**Внимание!** Во время зарядки аккумулятора пользоваться устройством нельзя.

### Насадки в комплекте

В базовой комплектации портативного ирригатора RL 450 5 сменных насадок в прозрачном пластиковом пенале.



**Внимание!** Насадка должна быть строго индивидуальной. Совместное использование одной насадки различными пользователями не рекомендуется.



2 стандартные насадки для регулярного использования.



Пародонтальная насадка с резиновым наконечником для очищения десневых карманов.



Ортодонтическая насадка для ухода за брекетами и другими системами.




Насадка для очищения поверхности языка.

### Установка и замена насадки

Установите насадку в разъем, расположенный на верхней части ирригатора, и, надавливая, вставьте ее до щелчка. Для удаления насадки удерживайте нажатой кнопку блокировки и извлеките насадку из корпуса прибора.

**Внимание!** Не нажимайте кнопку извлечения насадки во время работы устройства.

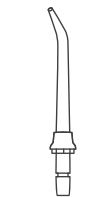

### Установка и снятие резервуара для жидкости

Удерживайте корпус ирригатора левой рукой, а правой поверните резервуар по часовой стрелке и, потянув, отделите от корпуса. Чтобы установить резервуар, совершите обратные действия.

### Примечание:


В резервуаре вы можете заметить некоторое количество жидкости. Это дистиллированная вода, оставшаяся после заводской проверки. Она не представляет никакой опасности для вашего здоровья.



### Наполнение резервуара

Наполнять резервуар удобнее всего через боковое отверстие. Для этого откройте заглушку резервуара и налейте чистую воду. Закройте заглушку.

Заливайте в резервуар воду, температура которой не выше +40 °C, или раствор, рекомендованный лечащим врачом-стоматологом.

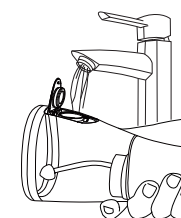

## Включение и выключение прибора

- Для включения прибора один раз нажмите кнопку включения питания ON/OFF.
- Для выключения ирригатора нажмите один раз на кнопку ON/OFF.

## Выбор режима чистки


Выбор режима чистки осуществляется кнопкой MODE, что подтверждается включением соответствующего светового индикатора на корпусе устройства. После включения ирригатор будет работать в том режиме, который использовался последним перед отключением устройства.

Портативный ирригатор RL 450 может работать в режиме чистки (ирригации) с различными уровнями давления: 758 кПа, 690 кПа, 550 кПа, 415 кПа, 275 кПа. После включения ирригатор будет работать в том режиме, который использовался последним перед отключением устройства.

**Внимание!** В начале применения прибора рекомендуется использовать прибор на низком давлении. Это поможет адаптироваться к ирригационной чистке и избежать риска появления воспаления и кровоточивости десен.

## Режим ирригации

Расположите насадку под углом 45 градусов к поверхности зуба. Включите ирригатор, направьте водную струю на область чистки. Вода должна естественным образом стекать из полости рта в раковину. Для получения лучших результатов вначале обработайте область боковых зубов, а затем передних. Продвигайте насадку вдоль контура десны, задерживая ее в межзубных промежутках.

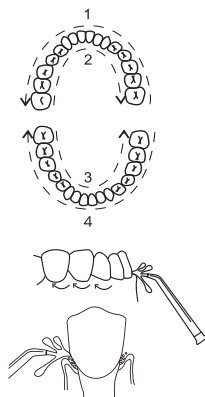

## После завершения ирригации

Нажмите кнопку выключения питания. Слейте оставшуюся в резервуаре жидкость. При необходимости зарядите аккумуляторную батарею.

- **Ни в коем случае не погружайте ирригатор в какую-либо жидкость!**

## Резервуар

После каждой процедуры ирригации сливайте из резервуара оставшуюся в нем жидкость. Такие меры предосторожности при длительном использовании прибора помогут избежать образования известкового налета на его деталях и возникновения неприятного запаха.

## Использование ополаскивателей и растворов

Для лучшего эффекта рекомендуется использовать ополаскиватели и специализированные бальзамы Revyline. Расчет дозировки производите согласно инструкции используемого средства. После каждого использования растворов необходимо промыть ирригатор.

**Внимание!** В состав некоторых ополаскивателей для полости рта входит спирт, который при длительном нахождении в системе прибора может повредить его детали и в конечном итоге снизить срок его эксплуатации.

## Уход и обслуживание

Запрещено хранить жидкость в резервуаре, а также использовать прибор в горизонтальном положении.

Используйте мягкую ткань и мягкий неабразивный очиститель для очистки поверхности прибора.

В процессе эксплуатации из-за жесткой воды на деталях прибора могут образовываться известковые отложения. Для их устранения используйте специальное средство Revyline для очистки ирригатора, согласно инструкции по его применению. Производитель рекомендует проводить чистку ирригатора от одного до трех раз в три месяца в зависимости от жесткости воды.

## Гарантия

### Гарантия на прибор 2 года.

Гарантированное техническое обслуживание прибора осуществляется в течение действующего гарантийного срока бесплатно. Далее обслуживание ирригатора осуществляется за счет покупателя.

### Гарантия не распространяется:

- На расходные материалы и комплектующие.
- На товары, которые вышли из строя и/или получили дефекты вследствие применения их не по назначению, неосторожного и/или небрежного использования (включая перегрузку), приведшего к повреждениям, модификации,

вскрытия и/или ремонта неуполномоченной организацией (частным лицом), нарушения правил эксплуатации, и/или хранения, и/или транспортировки, указанных в руководстве по эксплуатации.

- На товары, которые вышли из строя и/или получили дефекты вследствие подключения к неправильному источнику питания.
- На товары, эксплуатировавшиеся с неустраненными недостатками.
- На неисправности, которые вызваны независимыми от производителя причинами, такими как действия третьих лиц, явления природы и стихийные бедствия, домашние и дикие животные, насекомые, попадание внутрь посторонних предметов и жидкостей.
- На внешние и внутренние загрязнения, царапины, трещины, потертости и прочие механические повреждения, возникшие в процессе эксплуатации и в результате естественного износа.

## Распространенные проблемы и их решение

### Не извлекается насадка

**Решение:** Во время извлечения насадки нажмите и удерживайте кнопку блокировки насадки, расположенную на корпусе прибора.

### Сложности выбора уровня напора струи

**Решение:** После включения прибора выберите необходимый режим работы прибора. Для повышения эффективности ирригации используйте режим, не причиняющий вам дискомфорта. При воспаленных и слабых деснах используйте пародонтальную насадку.

### Кровоточивость во время ирригации

**Решение:** Кровоточивость является характерным симптомом воспаления десен. При кровоточивости необходимо выбрать режим работы ирригатора с низким уровнем давления. Ирригатор удаляет зубной налет и бактерии с поверхности десен. Если при дальнейшем использовании кровоточивость продолжается, необходимо обратиться за консультацией к врачу-стоматологу.

### Как предотвратить разбрызгивание воды?

**Решение:** Во время ирригации не стойте вертикально прямо с широко открытым ртом. Наклонитесь по направлению к раковине, приоткройте рот. Вода будет естественным образом выливаться из полости рта.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

### ПОРТАТИВНЫЙ ИРРИГАТОР ДЛЯ ПОЛОСТИ РТА REVYLINE Модель: RL 450

Предназначен для профилактики болезней зубов и десен.

5 режимов работы

Емкость резервуара: 300 мл

Уровень давления жидкости: 275–758 кПа

Частота пульсации: 1200 в мин.

Литиево-ионный аккумулятор: 2000 mAh

Время полной зарядки: 5 ч.

Уровень влагозащиты: IPX7

Потребляемая мощность: 21 Вт

Материал корпуса: ABS-PC

Гарантия: 2 года

Средний срок службы: 5 лет

Хранить при комнатной температуре

### Комплектация

Основной блок ирригатора

5 сменных насадок в пенале

Кабель USB Type-C

Дорожная сумка

Инструкция по эксплуатации

Гарантийный талон

Если у вас остались вопросы, обратитесь в сервисный центр.

☎ 8 (800) 775-38-49

🌐 [www.revyline.ru](http://www.revyline.ru)