

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- 4 режима работы RL 840
- 7 уровней давления в режиме DIY
- 2-минутный таймер
- Частота пульсации – 1600 в мин.
- Уровень давления жидкости – 210–900 кПа
- Материал корпуса – ABS-пластик
- Влагозащита – IPX7
- Емкость резервуара – 200 мл
- Питание – аккумулятор Li-ion (1200 mAh)
- Потребляемая мощность – 9 Вт
- Номинальное напряжение – 3,7 В
- Зарядка через кабель USB Type-C
- Время полной зарядки – 3 ч.
- Аккумулятор держит заряд до 20 дней
- Размеры в сложенном состоянии – 60,9x43,4x141,8 мм
- Размеры в рабочем состоянии (без насадки) – 60,9x43,4x216,7 мм
- Средний срок службы – 5 лет
- Хранить при комнатной температуре

## КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Основной блок ирригатора
- 2 сменные насадки
- Кабель USB Type-C
- Инструкция по эксплуатации

## ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Название организации \_\_\_\_\_

Дата продажи \_\_\_\_\_

М.П. \_\_\_\_\_

ГАРАНТИЯ – 2 ГОДА

# СОБЕРИ ПОЛНУЮ ЛИНЕЙКУ

## СРЕДСТВ ГИГИЕНЫ ПОЛОСТИ РТА

### Электрические звуковые зубные щетки



Благодаря интенсивным колебательным движениям щетины звуковая щетка эффективно очищает поверхности зубов, межзубные промежутки и полирует эмаль.

### Чистящее средство



Чистящее средство для ирригатора используется для удаления известковых отложений и загрязнений с внутренних деталей прибора.

### Бальзамы и ополаскиватели



Предназначены для гигиенического ухода, профилактики и лечения стоматологических заболеваний, а также для приготовления растворов для процедур ирригации.

## ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ НА САЙТЕ

8 (800) 775-38-49  
[www.revyline.ru](http://www.revyline.ru)



# REVYLINE

## PORTABLE ORAL IRRIGATOR



ПОРТАТИВНЫЙ ИРРИГАТОР  
ДЛЯ ПОЛОСТИ РТА

# БЫСТРЫЙ СТАРТ

## ЗАРЯДКА АККУМУЛЯТОРА

- Зарядка осуществляется с помощью кабеля USB Туре-С.
- Перед использованием ирригатора полностью зарядите аккумулятор.
- В процессе зарядки ирригатора сначала загорается и мигает один индикатор, потом – второй и далее – третий.
- Когда зарядка завершена, все три индикатора горят не мигая.

## НАСАДКИ В КОМПЛЕКТЕ


-  В базовой комплектации RL 840
-  2 стандартные сменные насадки.

## УСТАНОВКА И ХРАНЕНИЕ НАСАДКИ



Вставьте насадку в гнездо до щелчка. Чтобы снять насадку, нажмите на кнопку блокировки и потяните насадку вверх.

Внимание! Не нажимайте кнопку блокировки насадки во время работы устройства.

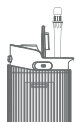

Насадку можно хранить в отделении для залива воды: откройте клапан, расположенный рядом с гнездом насадки, и поместите насадку внутрь наконечником вниз. Закройте клапан.

## НАЧАЛО РАБОТЫ



Включение и выключение прибора осуществляется с помощью кнопки вкл/выкл, выбор режимов работы – с помощью кнопки управления.

Портативный ирригатор RL 840  
позволяет использовать 4 режима работы:

● ○ ○	○ ● ○	○ ○ ●	● ○ ●
Standard	Soft	Pulse	DIY

## НАСТРОЙКА РЕЖИМА DIY



В режиме DIY нажмите и удерживайте кнопку управления (каждые 1–1,5 сек. давление будет возрастать). Отпустите кнопку, когда уровень давления будет вас устраивать.

## UV LAMP



После использования прибора рекомендуем продезинфицировать резервуар. Для этого вылейте из него оставшуюся воду и в течение 2–3 секунд удерживайте кнопку вкл/выкл. Процесс стерилизации начнется сразу после включения УФ-лампы и автоматически завершится через 2 минуты.

## НАПОЛНЕНИЕ РЕЗЕРВУАРА



Резервуар можно  
наполнять двумя  
способами.



## ПРОЦЕСС ИРРИГАЦИИ

- Залейте в резервуар воду, температура которой не выше +40 °С, или раствор, рекомендованный лечащим врачом-стоматологом.
- Расположите насадку под углом 45° к поверхности зуба.
- Включите ирригатор, направьте водную струю на область чистки.
- Вода должна естественным образом стекать из полости рта в раковину.
- Для получения лучших результатов вначале обработайте область боковых зубов, а затем передних.
- Продвигайте насадку вдоль контура десны, задерживаясь в межзубных промежутках.

В начале использования прибора выбирайте режим с низким уровнем давления, чтобы привыкнуть к ирригационной чистке и не травмировать десну.

Транспортировка, хранение и утилизация прибора:  
Транспортировка изделий осуществляется любым видом крытого транспорта в упаковке изготовителя, которая предохраняет изделия от механических повреждений, попадания на них грязи и влаги.  
Хранить изделия необходимо в упаковке изготовителя в помещении с вентиляцией вдали от прямых солнечных лучей и источников тепла при температуре от 0°С до +20°С.  
Утилизация производится в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

Импортер: ИП Обушников М.А., г. Элиста, ул. Джангара, д. 7  
Производитель: Iconbeauty (ShenZhen) Holding Ltd.  
7F, Block C, Idee Monto Industry Park, No.7002 Songbai Road, Guangming New Street, Shenzhen, China/Китай  
Сделано в Китае